

一次性可吸收结扎夹使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读说明书。

- 本产品为一次性使用无菌产品，不得重复使用或重新灭菌后使用。
- 本使用说明书只是本产品使用的辅助说明，不作为外科手术的医学或医疗参考。
- 本公司依靠医生、工程师对可以预见的风险予以确定和评估，但并不说明产品的使用已无风险。

【产品名称】 一次性可吸收结扎夹

【型号规格】 KJZJ-6-L、KJZJ-6-M、KJZJ-6-S

【产品结构和性能】

本产品由结扎夹、固定盖和底座组成。其中，固定盖和底座组成底座组件，用于固定放置结扎夹。结扎夹由聚乙交酯-三亚甲基碳酸酯的共聚物（PGA-TMC）材料制成。固定盖由聚丙烯（PP）制成，底座由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）制成。产品经环氧乙烷灭菌，为一次性使用产品。

【预期用途】 适用于泌尿外科、胃肠外科、胆道外科手术中的血管、胆管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁。不适用于大动脉、大静脉结扎。

【作用机理】

本产品结扎夹放置于底座组件中，与施夹钳配合使用。结扎夹可在人体内通过水解作用逐步降解吸收。

【禁忌症】

1. 本产品不适用于要求组织或脉管长期或永久结扎的部位。
2. 本产品不适用于不能进行结扎的血管上。
3. 本产品不适用于输卵管的避孕结扎。

【警告】

1. 本产品供货时经环氧乙烷灭菌，包装破损，严禁使用。
2. 任何以肉眼检查发现有损坏和/或怀疑损坏的现象，都应放弃使用，并与本公司代表联系。
3. 产品为一次性使用，不得重复处理或重复灭菌后使用。
4. 在结扎夹闭合前，应确保待结扎的组织完全位于闭合的夹子内。
5. 在结扎夹闭合前，应检查是否所有组织都在夹内以确保结扎的组织正确。取出完全

闭合的结扎夹比较困难。不当放置的结扎夹可通过除夹器去除。

6. 本产品供已受可吸收结扎夹专业知识和技术培训后的医师和/或在有相关经验人员的指导下使用。
7. 在未完整阅读使用说明书之前请勿尝试使用该产品，任何的不谨慎操作都将给手术的成功带来风险。

【注意事项】

1. 本产品供货时经环氧乙烷灭菌，产品已处于无菌状态，如果无菌隔离层已损坏，严禁使用，并与本公司代表联系。
2. 使用前请确认：规格型号、有效期、包装完好。
3. 使用过或过期的产品应作为医疗废物丢弃和处理。

【不良反应】

根据报道，本产品可能会有如下不良反应：

1. 吸收率不一致。
2. 结扎不充分。
3. 出血组织肉芽形成。
4. 纤维化和/或黏连。

【使用说明】

1. 根据手术时血管和组织大小，临床医生应判断选择合适的结扎夹。
2. 选择合适的施夹钳进行消毒处理，抓紧施夹钳，并将施夹钳的头部准确的放入结扎夹的底座组件内，确认头部垂直于底座组件，轻松的按下施夹钳，直到听到咔嗒声，注意不得强行将施夹钳按入底座组件或者结扎夹，结扎夹可以轻松的进入和退出底座组件。
3. 从底座组件移走施夹钳，确保结扎夹被安全的夹持在施夹钳的咬合面中，必须固定夹持底座组件，用于保证结扎夹能够被移开。
4. 在使用过程中，定位结扎夹的单齿，确保使用者能用肉眼辨识被结扎的结构。
5. 采取能够提供扣锁装置清晰视野的方式，在被结扎的血管和体腔组织周围定位结扎夹，在施夹钳的手柄上施加足够的力，使其咬合面关闭和结扎夹被锁紧，松开施夹钳的手柄，让施夹钳退出到合适的位置。
6. 注意：如果血管和体腔组织被剥离，就距结扎夹约 2-3mm 的位置留置末端边缘，不要将结扎夹一端作为切开导引。

【产品包装】 本产品包装采用双层包装，内层为纸塑袋，外层为铝塑袋密封包装。单盒包装。


【灭菌方式】 环氧乙烷灭菌。

【贮存条件】

本产品于室温下储存。

避免长期置于高温下。

不得置于温度高于 54℃ 的环境中。

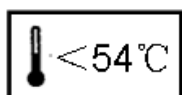

【有效期】 两年。